



Technika hyperangulovaných lžic




- 1** Vložte lžici podél středové čáry a pak zasuňte špičku až za kořen jazyka.

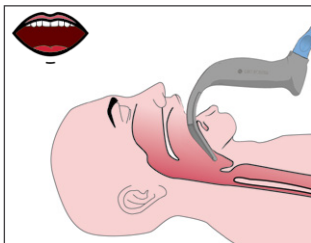


- 2** Identifikujte epiglottis a zasuňte lžici do vallecula tak, abyste viděli glottis.

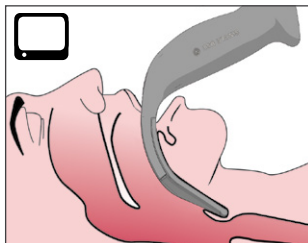


- 3** Pomocí mandrénu GlideRite (volitelný) zavedte ET kanylu podél pravé strany lžice.

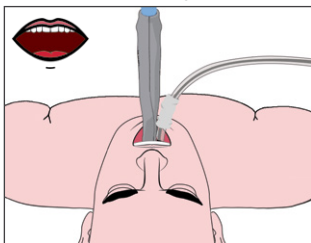


- 4** Dokončete intubaci.

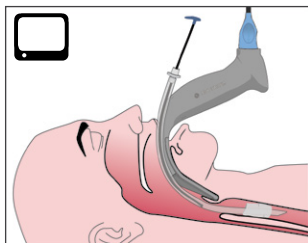

- 5** Mandrén GlideRite vyjmete tak, že jej táhnete směrem k nohám pacienta.

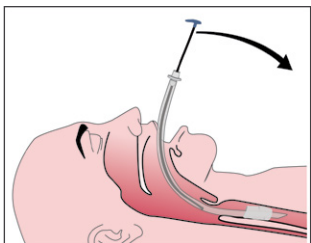

 – Během kroku se dívejte do úst.

 – Během kroku se dívejte na monitor.



Důležité: Tento dokument slouží pouze pro rychlou orientaci. Úplné pokyny naleznete v návodu k provozu a údržbě, který je k dispozici na internetové adrese verathon.com/service-and-support.



Verathon Medical (Kanada) ULC
2227 Douglas Road
Burnaby, BC V5C 5A9, Kanada
Tel.: +1 604 439 3009
Fax: +1 604 439 3039



Verathon Medical (Evropa) B.V.
Willem Fenengastraat 13
1096 BL Amsterdam, Nizozemsko
Tel.: +31 (0) 20 210 30 91
Fax: +31 (0) 20 210 30 92



Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011, USA
Tel.: +1 800 331 2313 (pouze USA a Kanada)
Tel.: +1 425 867 1348 Fax: +1 425 883 2896



Anandic Medical Systems AG
Stadtweg 24
8245 Feuerthalen
Švýcarsko



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Švýcarsko

Verathon Medical (Austrálie) Pty Limited
Unit 9, 39 Herbert Street
St Leonards NSW 2065
Austrálie
Tel.: 1800 613 603 / Fax: 1800 657 970 (v rámci Austrálie)
Tel.: +61 2 9431 2000 / Fax: +61 2 9475 1201 (mezinárodní)

verathon

GlideRite, Verathon a jejich příslušné symboly jsou ochranné známky společnosti Verathon Inc. Všechny ostatní názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

© 2023 Verathon Inc.



0900-4511-CSCZ REV-02